

KIMAL

Aportando innovación en la atención sanitaria

**SU
GAMA**

ALTIUS CVC

REDUZCA

**LOS RIESGOS PARA EL PACIENTE
CON ALTIUS**



SEGURIDAD DEL PACIENTE



EN EL
CENTRO

DE NUESTRO TRABAJO

¿POR QUÉ ELEGIR KIMAL?

Más de 40 años de ex-
periencia en catéteres
vasculares.



TRATANDO A MÁS DE 2 MILLO-
NES DE PACIENTES ANUAL-
MENTE.



Planta de fabricación
con tecnología de vanguardia.

UTILIZANDO
**DEL SIGLO
XXI**
MÉTODOS Y
MATERIALES DE
FABRICACIÓN

Over **6 Millones**
Dispositivos médicos vendidos*
(en 2020)



Suministrando hospitales
en más de 70 países
de todo el mundo.

GalardonadosInnovación



Fundada en
1964

KIMAL
Aportando innovación en la atención sanitaria

Reduzca los riesgos para el paciente con Altius

Nuestra gama:



Altius Clásico es una gama de catéteres tradicional con un kit de inserción superior.



Altius es una gama de CVC del siglo XXI diseñada para reducir los riesgos para el paciente.



Altius Proactiv + es un antimicrobiano sin clorhexidina, no eluyente y con enlaces covalentes, diseñado para proteger a su paciente durante toda la duración de la terapia.



Altius HP es el primer CVC con una línea púrpura específica para la administración de medios de contraste para TC hasta 300 psi y 10 ml por segundo.



Altius Proactiv + HP ofrece todas las ventajas de Altius Proactiv, además de una línea específica de alta presión compatible hasta 300 psi y 10 ml por segundo.

Contenido:

ALTIUS CLÁSICO

6

ALTIUS

8

ALTIUS PRO

10

ALTIUS HP

12

ALTIUS PRO HP


14

INNOVACIÓN

16

VASPACKS

18

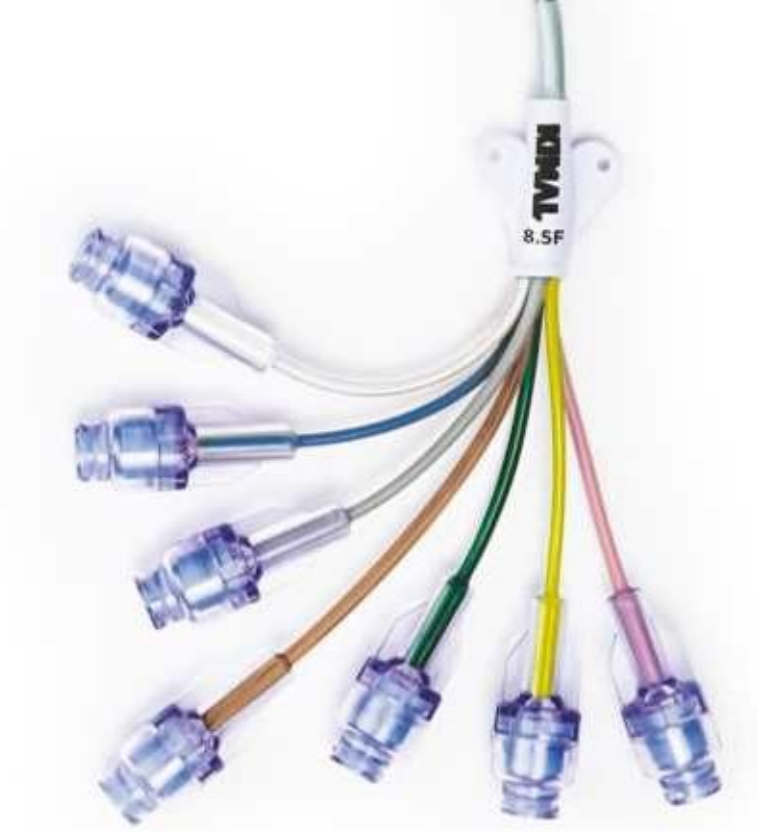



Altius Clásico es una gama de catéteres tradicional con un kit de inserción superior.

ALTIUS Clásico se fabrica con nuestra exclusiva tecnología multitubo, que garantiza lúmenes perfectamente redondos.

Gama para adultos y Pediátrica.

La Gama

Gama para adultos de 1 a 5 lúmenes.



Lúmenes perfectamente redondos en todas las configuraciones.

¿Por qué elegir ALTIUS Clásico?



Tecnología Multitubo

Hasta 5 lúmenes sin comprometer el calibre francés ni el caudal.




Alto Contenido de Bario

Visualización sencilla bajo rayos X.



Kit de Inserción Superior

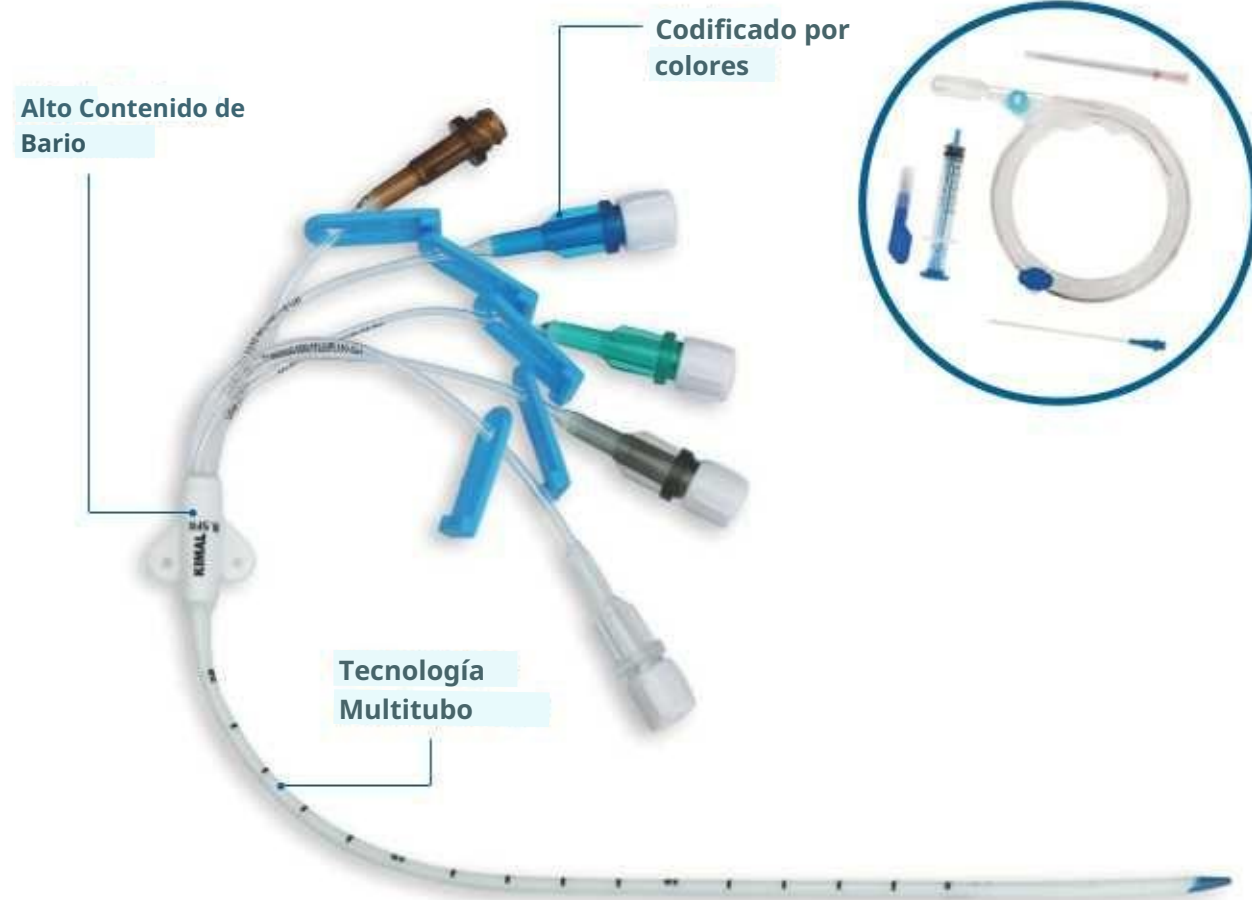

Kit de Inserción Superior




Aguja ecogénica de alta precisión

Fácil visualización mediante ecografía.



Dispensador de guías ALTIUS con Guía de Nitinol

Dispensador ergonómico de fácil manejo.

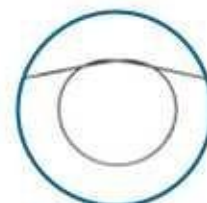

Guía de Nitinol: sin riesgo de acodamiento.



Dilatador Hidrofílico

Su fácil inserción reduce el traumatismo durante la dilatación.

También disponible en Kits de inserción; consulte la sección VasPacks.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
KCS115702	Conjunto de CVC Altius Clásico 2 Lúmenes 7 FR 15 cm
KCS120702	Conjunto de CVC Altius Clásico 2 Lúmenes 7 FR 20 cm
KCS130702	Conjunto de CVC Altius Clásico 2 Lúmenes 7 FR 30 cm
KCS115802	Conjunto de CVC Altius Clásico 2 Lúmenes 8 FR 15 cm
KCS120802	Conjunto de CVC Altius Clásico 2 Lúmenes 8 FR 20 cm
KCS115703	Conjunto de CVC Altius Clásico 3 Lúmenes 7 FR 15 cm
KCS120703	Conjunto de CVC Altius Clásico 3 Lúmenes 7 FR 20 cm
KCS130703	Conjunto de CVC Altius Clásico 3 Lúmenes 7 FR 30 cm
KCS115853	Conjunto de CVC Altius Clásico 3 Lúmenes 8.5 FR 15 cm
KCS120853	Conjunto de CVC Altius Clásico 3 Lúmenes 8.5 FR 20 cm
KCS115854	Conjunto de CVC Altius Clásico 4 Lúmenes 8.5 FR 15 cm
KCS120854	Conjunto de CVC Altius Clásico 4 Lúmenes 8.5 FR 20 cm
KCS130854	Conjunto de CVC Altius Clásico 4 Lúmenes 8.5 FR 30 cm
KCS115855	Conjunto de CVC Altius Clásico 5 Lúmenes 8.5 FR 15 cm
KCS120855	Altius Clásico Conjunto de CVC de 5 Lúmenes 8.5FR 20 cm
KCS130855	Altius Clásico Conjunto de CVC de 5 Lúmenes 8.5FR 30 cm
KCS113401	ALTIUS Clásico Pediátrico Conjunto de CVC de 1 Lumen 4 FR (18GA) 13 cm
KCS105402	Altius Clásico Pediátrico Conjunto de CVC de 2 Lúmenes 4FR 5 cm
KCS108402	Altius Clásico Pediátrico Conjunto de CVC de 2 Lúmenes 4FR 8 cm
KCS113402	Altius Clásico Pediátrico Conjunto de CVC de 2 Lúmenes 4FR 13 cm
KCS105502	Altius Clásico Pediátrico Conjunto de CVC de 2 Lúmenes 5FR 5 cm
KCS108502	Altius Clásico Pediátrico Conjunto de CVC de 2 Lúmenes 5FR 8 cm
KCS113502	Altius Clásico Pediátrico Conjunto de CVC de 2 Lúmenes 5FR 13 cm
KCS108403	Conjunto de CVC pediátrico clásico Altius de 3 Lúmenes, 4FR, 8 cm
KCS113403	Conjunto de CVC pediátrico clásico Altius de 3 Lúmenes, 4FR, 13 cm
KCS105503	Conjunto de CVC pediátrico clásico Altius de 3 Lúmenes, 5FR, 5 cm
KCS108503	Conjunto de CVC pediátrico clásico Altius de 3 Lúmenes, 5FR, 8 cm
KCS113503	Conjunto de CVC pediátrico clásico Altius de 3 Lúmenes, 5FR, 13 cm
KCS104302	Conjunto de CVC pediátrico clásico Altius de 2 Lúmenes, 3FR, 4 cm
KCS105302	Conjunto de CVC pediátrico clásico Altius de 2 Lúmenes, 3FR, 5 cm
KCS105403	Conjunto de CVC pediátrico clásico Altius de 3 Lúmenes, 4FR, 5 cm
KCS108302	Conjunto de CVC pediátrico clásico Altius de 2 Lúmenes, 3FR, 8 cm
KCS113302	Altius Clásico Pediátrico Conjunto de CVC de 2 Lúmenes 3FR 13cm
KCS115705	Altius Clásico Pediátrico Conjunto de CVC de 5 Lúmenes 7FR 15cm



ALTIUS es un CVC del siglo XXI diseñado para minimizar los riesgos para el paciente.

El diseño de ALTIUS se basa en las necesidades y la retroalimentación de los profesionales sanitarios, aportando la primera innovación en CVC en más de 40 años.

ALTIUS se fabrica utilizando nuestra técnica Multitubo patentada, que permite obtener lúmenes redondos en nuestras modernas instalaciones de fabricación.

La Gama

De 1 a 5 lúmenes, para uso en adultos y pacientes pediátricos. Gama de 7 lúmenes disponible para adultos.



Lúmenes perfectamente redondos en todas las configuraciones.

¿Por qué elegir ALTIUS?



Conectores Luersafe

Conector integrado para prevenir el riesgo de embolia gaseosa e infecciones.



Tecnología Multitubo

Hasta 7 Lúmenes sin comprometer el calibre francés ni el caudal.



Lúmenes codificados por colores

Para identificar fácilmente qué fármaco se administra a través de cada Lúmen.

Lúmenes codificados por colores

Conectores Luersafe

Tecnología Multitubo

Kit de Inserción Superior



Aguja ecogénica de alta precisión

Fácil visualización mediante ecografía.



Dispensador de guías ALTIUS con Guía de Nitinol

Dispensador ergonómico de fácil manejo.



Dilatador Hidrofílico

Su fácil inserción reduce el traumatismo durante la dilatación.

También disponible en Kits de inserción; consulte la sección VasPacks.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
K2CS115501	ALTIUS Conjunto de CVC de 1 Luz 5FR 16GA 15CM
K2CS115701	ALTIUS Conjunto de CVC de 1 Luz 7FR 14GA 15CM
K2CS120501	ALTIUS Conjunto de CVC de 1 Luz 5FR 16GA 20CM
K2CS120701	ALTIUS Conjunto de CVC de 1 Luz 7FR 14GA 20CM
K2CS115702	ALTIUS Conjunto de CVC de 2 Lúmenes 7FR 15CM
K2CS120702	ALTIUS Conjunto de CVC de 2 Lúmenes 7FR 20CM
K2CS130702	ALTIUS Conjunto de CVC de 2 Lúmenes 7FR 30CM
K2CS111703	ALTIUS Conjunto de CVC de 3 Lúmenes 7FR 11CM
K2CS115703	ALTIUS Conjunto de CVC de 3 Lúmenes 7FR 15CM
K2CS120703	ALTIUS Conjunto de CVC de 3 Lúmenes 7FR 20CM
K2CS130703	ALTIUS Conjunto de CVC de 3 Lúmenes 7FR 30CM
K2CS111854	ALTIUS Conjunto de CVC de 4 Lúmenes 8.5FR 11cm
K2CS115854	ALTIUS Conjunto de CVC de 4 Lúmenes 8.5FR 15CM
K2CS120854	ALTIUS Conjunto de CVC de 4 Lúmenes 8.5FR 20cm
K2CS130854	ALTIUS Conjunto de CVC de 4 Lúmenes 8.5FR 30CM
K2CS111854	ALTIUS Conjunto de CVC de 4 Lúmenes 8.5FR 11cm
K2CS115854	ALTIUS Conjunto de CVC de 4 Lúmenes 8.5FR 15CM
K2CS120854	ALTIUS Conjunto de CVC de 4 Lúmenes 8.5FR 20cm
K2CS130854	ALTIUS Conjunto de CVC de 4 Lúmenes 8.5FR 30CM
K2CS111855	ALTIUS Conjunto de CVC de 5 Lúmenes 8.5FR 11cm
K2CS115855	CONJUNTO DE CVC ALTIUS 5 LÚMENES 8.5FR 15CM
K2CS115905	Conjunto de CVC ALTIUS 5 Lúmenes 9FR 15CM
K2CS120855	Conjunto de CVC ALTIUS 5 Lúmenes 8.5FR 20CM
K2CS120905	Conjunto de CVC ALTIUS 5 Lúmenes 9FR 20CM
K2CS130855	Conjunto de CVC ALTIUS 5 Lúmenes 8.5FR 30CM
K2CS120703ECG	Conjunto de CVC ALTIUS 3 Lúmenes 7FR 20CM ECG
K2CS120853	Conjunto de CVC ALTIUS 3 Lúmenes 8.5FR 20CM
K2CS120855ECG	Conjunto de CVC ALTIUS 5 Lúmenes 8.5FR 20CM ECG
K2CS111857	ALTIUS 7 LUMEN CONJUNTO DE CVC 8.5FR 11 CM
K2CS115857	ALTIUS 7 LUMEN CONJUNTO DE CVC 8.5FR 15 CM
K2CS120857	ALTIUS Conjunto de CVC de 7 Lúmenes, 8,5 FR y 20 cm



ALTIUS Proactiv + es un antimicrobiano sin Clorhexidina, no eluyente y con unión covalente, que protege a su paciente hasta 30 días.

ALTIUS Proactiv + combina un recubrimiento no trombogénico (PEG) con PHMB (un antimicrobiano) para proporcionar una eficacia antimicrobiana superior.

La Gama

De 1 a 5 y 7 Lúmenes, gama para adultos.



Lúmenes perfectamente redondos en todas las configuraciones.

¿Por qué elegir ALTIUS Pro?



ProActiv

PHMB no eluyente que proporciona protección antimicrobiana a su paciente hasta 30 días.




Conectores Luersafe

Conector integrado para prevenir el riesgo de embolia gaseosa e infecciones.



Tecnología Multitubo

Hasta 7 Lúmenes sin comprometer el calibre francés ni el caudal.

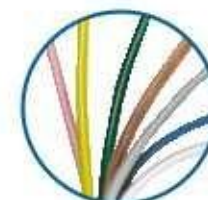

Lúmenes codificados por colores

Para identificar fácilmente qué fármaco se administra a través de cada Lúmen.

Kit de Inserción Superior



Aguja ecogénica de alta precisión

Fácil visualización mediante ecografía.



Dispensador de guías ALTIUS con Guía de Nitinol


Dispensador ergonómico de fácil manejo.



Dilatador Hidrofílico

Su fácil inserción reduce el traumatismo durante la dilatación.

Lúmenes codificados por colores

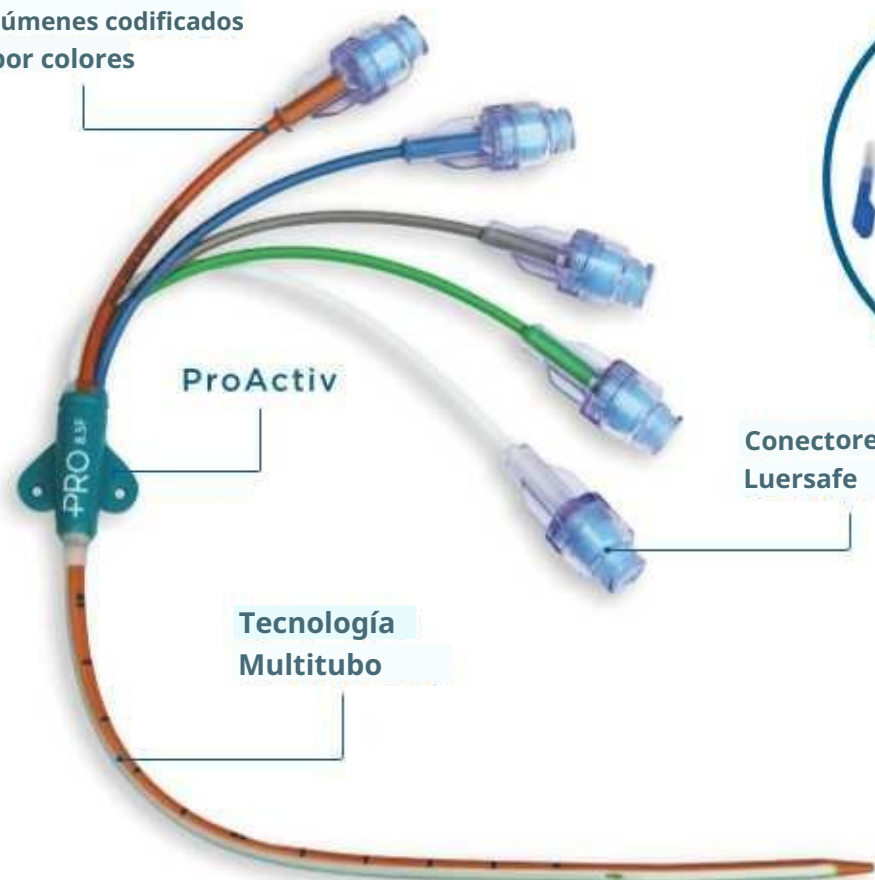

ProActiv

Conectores Luersafe

Tecnología Multitubo

También disponible en Kits de inserción; consulte la sección VasPacks.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
K2CS215701	ALTIUS Pro + Conjunto de CVC de 1 Lúmen 7 FR (14GA) 15 cm
K2CS215501	ALTIUS Pro + Conjunto de CVC de 1 Lúmen 5 FR (16GA) 15 cm
K2CS220501	ALTIUS Pro + Conjunto de CVC de 1 Luz 5 FR (16GA) 20 cm
K2CS220701	ALTIUS Pro + Conjunto de CVC de 1 Luz 7 FR (14Ga) 20 cm
K2CS215702	ALTIUS Pro + Conjunto de CVC de 2 Lúmenes 7 FR 15 cm
K2CS220702	ALTIUS Pro + Conjunto de CVC de 2 Lúmenes 7 FR 20 cm
K2CS230702	ALTIUS Pro + Conjunto de CVC de 2 Lúmenes 7 FR 30 cm
K2CS211703	ALTIUS Pro + Conjunto de CVC de 3 Lúmenes 7 FR 11 cm
K2CS215703	ALTIUS Pro + Conjunto de CVC de 3 Lúmenes 7 FR 15 cm
K2CS220703	ALTIUS Pro + Conjunto de CVC de 3 Lúmenes 7 FR 20 cm
K2CS230703	ALTIUS Pro + Conjunto de CVC de 3 Lúmenes 7 FR 30 cm
K2CS211854	ALTIUS Pro + Conjunto de CVC de 4 lúmenes 8,5 FR 11 cm
K2CS215854	ALTIUS Pro + Conjunto de CVC de 4 lúmenes 8,5 FR 15 cm



ALTIUS™ HP: la línea púrpura de ALTIUS HP es compatible con la administración de hasta 300 psi a 10 ml/s y medios de contraste con una viscosidad de hasta 11,8 cP.

La Gama

Gama para adultos de 1 a 5 lúmenes.



Lúmenes perfectamente redondos en todas las configuraciones.

¿Por qué elegir ALTIUS HP?



Línea HP

Línea específica compatible con hasta 300 psi y 10 ml/s.



Conectores Luersafe

Conector integrado para prevenir el riesgo de embolia gaseosa e infecciones.



Tecnología Multitubo

Hasta 5 lúmenes sin comprometer el calibre francés ni el caudal.



Lúmenes codificados por colores

Para identificar fácilmente qué fármaco se administra a través de cada Lúmen.

Kit de Inserción Superior




Aguja ecogénica de alta precisión

Fácil visualización mediante ecografía.




Dispensador de guías ALTIUS con Guía de Nitinol

Dispensador ergonómico de fácil manejo.

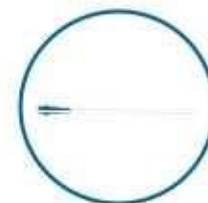

Dilatador Hidrofílico

Su fácil inserción reduce el traumatismo durante la dilatación.

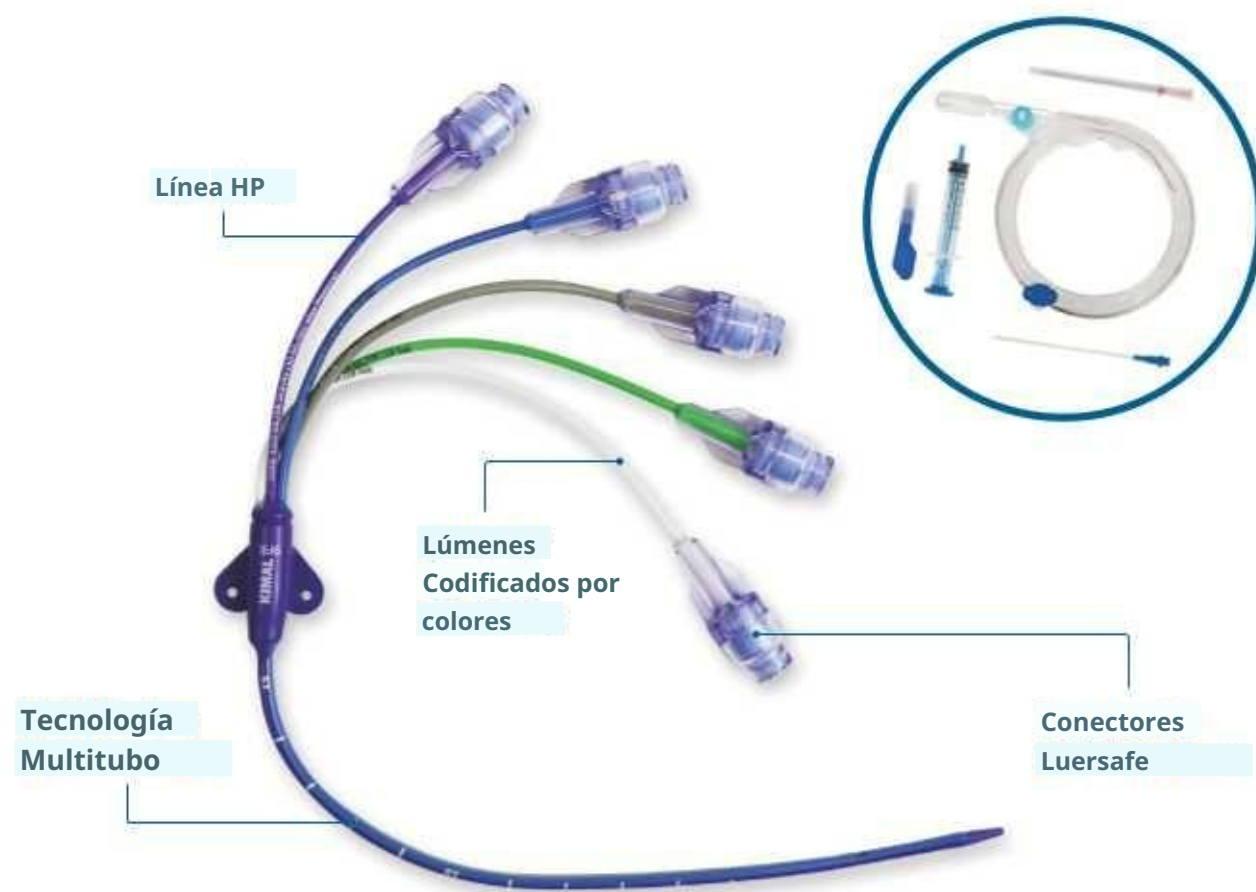

También disponible en Kits de inserción; consulte la sección VasPacks.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
K2CS115501P	Conjunto de CVC ALTIUS HP de 1 Lumen 5 FR 16GA 15 cm
K2CS115701P	Conjunto de CVC ALTIUS HP de 1 Lumen 7 FR 14GA 15 cm
K2CS120501P	Conjunto de CVC ALTIUS HP de 1 Lumen 5 FR 16GA 20 cm
K2CS120701P	Conjunto de CVC ALTIUS HP de 1 Lumen 7 FR 14GA 20 cm
K2CS115702P	Conjunto de CVC ALTIUS HP de 2 Lúmenes 7 FR 15 cm
K2CS120702P	Conjunto de CVC ALTIUS HP de 2 Lúmenes 7 FR 20 cm
K2CS130702P	Conjunto de CVC ALTIUS HP de 2 Lúmenes 7 FR 30 cm
K2CS111703P	Conjunto de CVC ALTIUS HP de 3 Lúmenes 7 FR 11 cm
K2CS115703P	Conjunto de CVC ALTIUS HP de 3 Lúmenes 7 FR 15 cm
K2CS120703P	ALTIUS HP Conjunto de CVC de 3 Lúmenes, 7 FR, 20 cm
K2CS130703P	ALTIUS HP Conjunto de CVC de 3 Lúmenes, 7 FR, 30 cm
K2CS111904P	ALTIUS HP Conjunto de CVC de 4 lúmenes, 9 FR, 11 cm
K2CS115904P	ALTIUS HP Conjunto de CVC de 4 lúmenes, 9 FR, 15 cm
K2CS120904P	ALTIUS HP Conjunto de CVC de 4 lúmenes, 9 FR, 20 cm
K2CS130904P	ALTIUS HP Conjunto de CVC de 4 lúmenes, 9 FR, 30 cm
K2CS111905P	ALTIUS HP Conjunto de CVC de 5 lúmenes, 9 FR, 11 cm
K2CS115905P	ALTIUS HP Conjunto de CVC de 5 Lúmenes, 9 FR, 15 cm
K2CS120905P	ALTIUS HP Conjunto de CVC de 5 Lúmenes, 9 FR, 20 cm
K2CS130905P	ALTIUS HP Conjunto de CVC de 5 Lúmenes, 9 FR, 30 cm
K2CS115703P	Conjunto de CVC ALTIUS HP de 3 Lúmenes 7 FR 15 cm
K2CS115802P	ALTIUS HP Conjunto de CVC de 2 Lúmenes, 8 FR, 15 cm
K2CS115803P	Conjunto de CVC ALTIUS HP de 3 luces 8FR 15 cm
K2CS120803P	Conjunto de CVC ALTIUS HP de 3 luces 8FR 20 cm



ALTIUSTM PROHP hasta 30 días.

ALTIUS Proactiv + HP: todos los beneficios de ALTIUS Proactiv + y una línea púrpura de alta presión para administrar 300 psi a 10 ml/s.

ALTIUS Proactiv + HP es un antimicrobiano sin Clorhexidina, no eluyente y con unión covalente, diseñado para proteger a su paciente durante


ALTIUS Pro HP es el primer CVC con una línea púrpura específica compatible para administrar hasta 300 psi a 10 ml/s, y con una clasificación de viscosidad de hasta 11,8 cP.

La Gama

Gama para adultos de 1 a 5 lúmenes.



Lúmenes perfectamente redondos en todas las configuraciones.

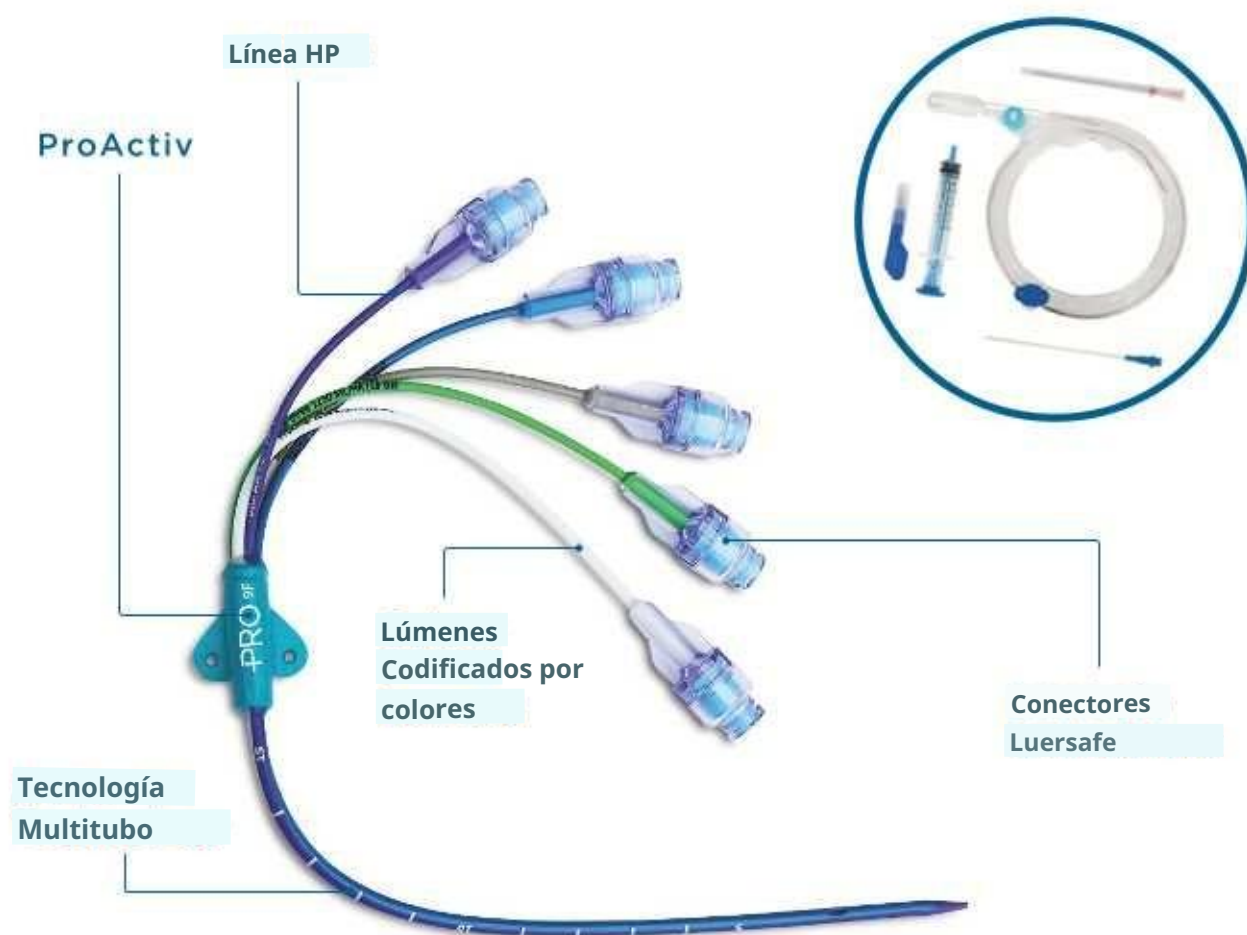

¿Por qué elegir ALTIUS Pro HP?



Línea HP

Línea específica compatible con hasta 300 psi y 10 ml/s.



ProActiv

PHMB no eluyente que proporciona protección antimicrobiana a su paciente hasta 30 días.



Conectores Luersafe

Conector integrado para prevenir el riesgo de embolia gaseosa e infecciones.



Tecnología Multitubo

Hasta 5 lúmenes sin comprometer el calibre francés ni el caudal.



Lúmenes codificados por colores

Para identificar fácilmente qué fármaco se administra a través de cada Lúmen.

Kit de Inserción Superior




Aguja ecogénica de alta precisión

Fácil visualización mediante ecografía.



Dispensador de guías ALTIUS con Guía de Nitinol

Dispensador ergonómico de fácil manejo.

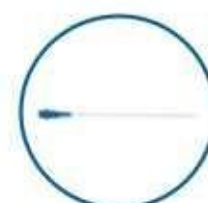

Dilatador Hidrofílico

Su fácil inserción reduce el traumatismo durante la dilatación.

También disponible en Kits de inserción; consulte la sección VasPacks.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
K2CS215501P	Conjunto de CVC ALTIUS Pro + HP de 1 luz 5 FR (16GA) 15 cm
K2CS215701P	ALTIUS Pro + HP Conjunto de CVC de 1 Lumen 7 FR (14GA) 15 cm
K2CS220501P	ALTIUS Pro + HP Conjunto de CVC de 1 Lumen 5 FR (16GA) 20 cm
K2CS220701P	ALTIUS Pro + HP Conjunto de CVC de 1 Lumen 7 FR (14GA) 20 cm
K2CS215702P	ALTIUS Pro + HP Conjunto de CVC de 2 Lúmenes 7 FR 15 cm
K2CS220702P	ALTIUS Pro + HP Conjunto de CVC de 2 Lúmenes 7 FR 20 cm
K2CS230702P	ALTIUS PRO + HP Conjunto de CVC de 2 Lúmenes 7 FR 30 cm
K2CS211703P	ALTIUS PRO + HP Conjunto de CVC de 3 Lúmenes 7 FR 11 cm
K2CS215703P	ALTIUS Pro + HP Conjunto de CVC de 3 Lúmenes 7 FR 15 cm
K2CS220703P	ALTIUS Pro + HP Conjunto de CVC de 3 Lúmenes 7 FR 20 cm
K2CS230703P	ALTIUS PRO + HP Conjunto de CVC de 3 Lúmenes 7 FR 30 cm
K2CS211904P	ALTIUS PRO + HP Conjunto de CVC de 4 lúmenes 9 FR 11 cm
K2CS215904P	ALTIUS Pro + HP Conjunto de CVC de 4 lúmenes 9 FR 15 cm
K2CS220904P	ALTIUS PRO + HP Conjunto de CVC de 4 lúmenes 9 FR 20 cm
K2CS230904P	ALTIUS PRO + HP Conjunto de CVC de 4 lúmenes 9 FR 30 cm
K2CS211905P	ALTIUS Pro + HP Conjunto de CVC de 5 lúmenes 9 FR 11 cm
K2CS215905P	ALTIUS Pro + HP Conjunto de CVC de 5 lúmenes 9 FR 15 cm
K2CS220905P	ALTIUS Pro + HP Conjunto de CVC de 5 lúmenes 9 FR 20 cm
K2CS230905P	ALTIUS PRO + HP Conjunto de CVC de 5 lúmenes 9 FR 30 cm

Kimal está comprometida con la innovación continua, centrada en la mejora de los resultados clínicos y la seguridad del paciente. Kimal ha desarrollado una serie de productos innovadores, posible gracias al uso de la tecnología multitubo.



Una gama única de catéteres diseñada para la administración de fluidos a altos caudales.

La exclusiva tecnología multitubo incorpora un lumen de gran calibre, capaz de proporcionar altos caudales, manteniendo todas las ventajas de un ALTIUS CVC.


Gama:

CVC de 2 a 6 lúmenes en las gamas Proactiv+ y HP.

5 lúmenes, con 2 lúmenes de gran calibre.

CVC de 8 lúmenes con un lumen central de gran calibre.

Disponible con línea de alta presión y con recubrimiento antimicrobiano Proactiv+.

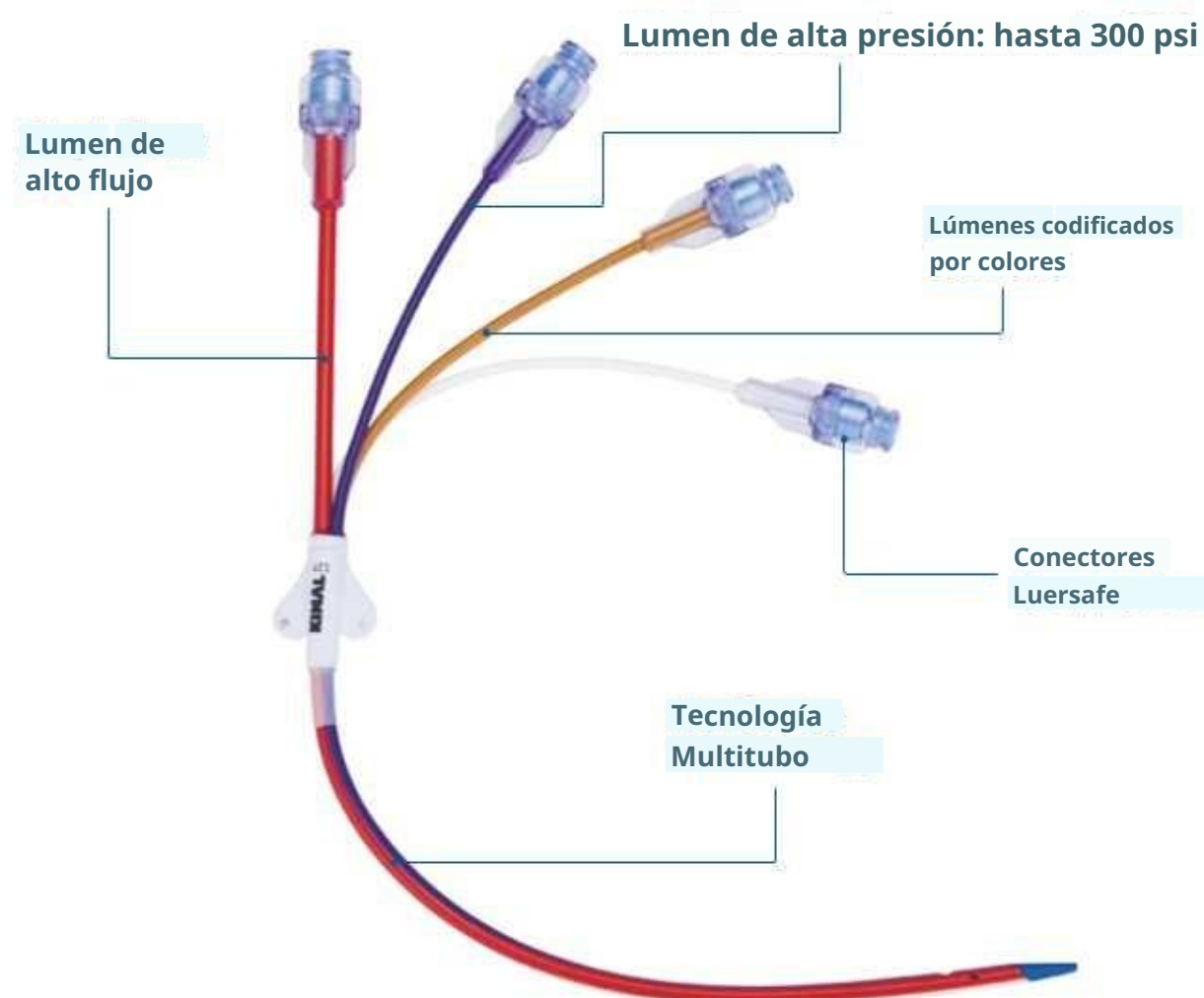


El primer catéter de 7 lúmenes con tan solo 8,5 FR gracias a nuestra exclusiva tecnología Multitubo.

Disponer de 7 lúmenes reduce el uso de llaves de tres vías y extensiones, lo que puede evitar retrasos en la administración de medicación y errores en la infusión.

ALTIUS de 7 lúmenes, con todas las ventajas de la gama ALTIUS.

Disponible en 11, 15 cm, 20 cm y con recubrimiento antimicrobiano Proactiv+.

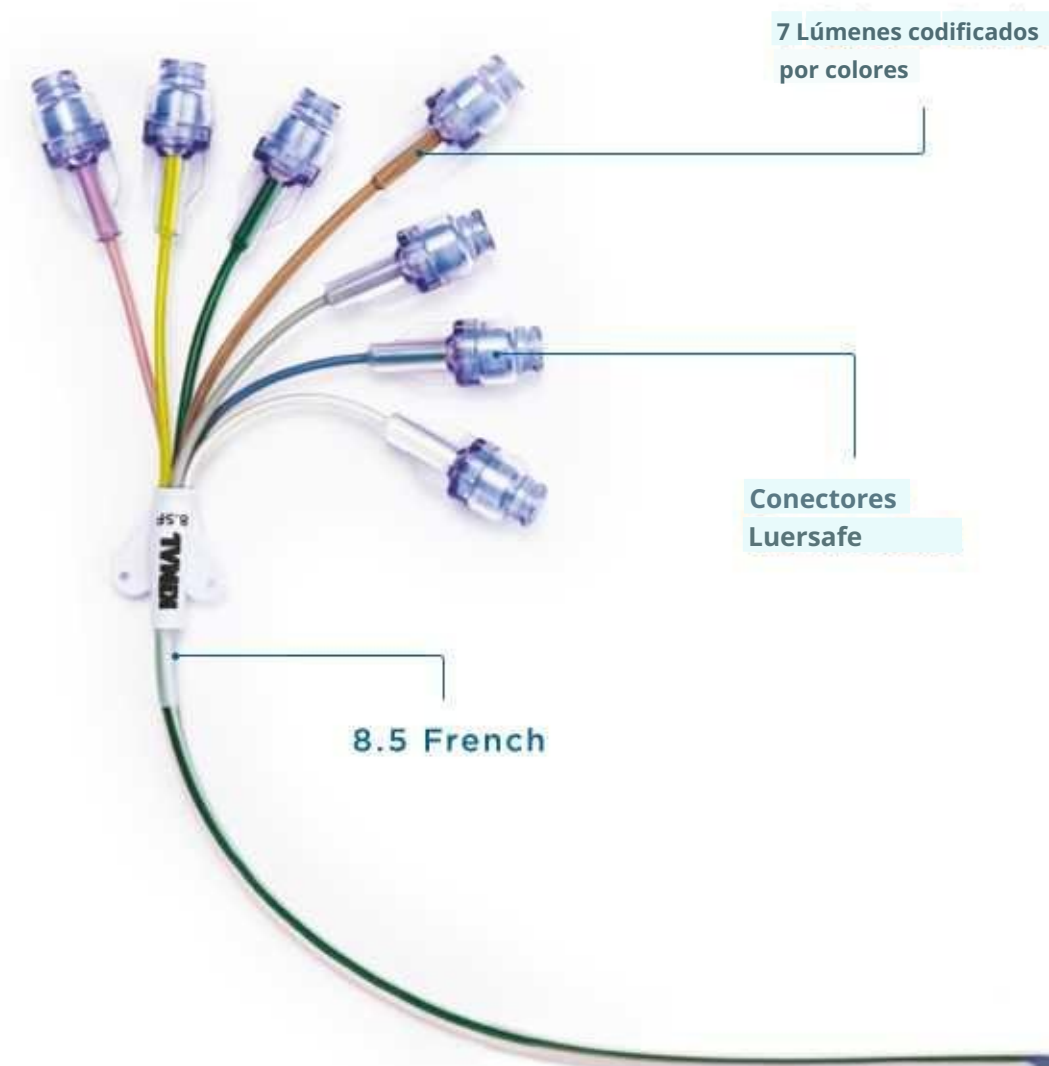



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
K2CS115852HF	Conjunto de CVC ALTIUS de Alto Flujo, 2 Lúmenes & 8,5 FR, 15 cm
K2CS120852HF	Conjunto de CVC ALTIUS de Alto Flujo, 2 Lúmenes & 8,5FR 20 cm
K2CS115853HF	Conjunto de CVC ALTIUS de Alto Flujo, 3 Lúmenes & 8,5FR 15 cm
K2CS120853HF	Conjunto de CVC ALTIUS de Alto Flujo, 3 Lúmenes & 8,5FR 20 cm
K2CS115852PHF	Conjunto de CVC ALTIUS de Alto Flujo HP, 2 Lúmenes & 8,5FR 15 cm
K2CS120852PHF	Conjunto de CVC ALTIUS de Alto Flujo HP, 2 Lúmenes & 8,5FR 20 cm
K2CS115853PHF	Conjunto de CVC ALTIUS de Alto Flujo HP, 3 Lúmenes & 8,5FR 15 cm
K2CS120853PHF	Conjunto de CVC ALTIUS de Alto Flujo HP, 3 Lúmenes & 8,5FR 20 cm
K2CS1151255PHF	Conjunto de CVC ALTIUS de Alto Flujo HP, 5 lúmenes & 8,5FR 15 cm
K2CS1201255PHF	Conjunto de CVC ALTIUS de Alto Flujo HP, 5 lúmenes & 8,5FR 20 cm
K2CS211857	CONJUNTO DE CVC ALTIUS PRO + 7 LÚMENES 8,5 FR 11 CM
K2CS215857	CONJUNTO DE CVC ALTIUS PRO + 7 LÚMENES 8,5 FR 15 CM
K2CS220857	CONJUNTO DE CVC ALTIUS PRO + 7 LÚMENES 8,5 FR 20 CM

La gama de catéteres de Kimal ofrece características únicas diseñadas para proteger a sus pacientes. Para una máxima seguridad del paciente, combine estos innovadores catéteres con nuestra completa gama de kits de procedimiento.

Ha seleccionado el mejor catéter; ahora, optimice su uso con el mejor kit de procedimiento. Para mejorar la práctica aséptica, los catéteres de Kimal pueden suministrarse integrados en los kits de inserción de línea que usted elija.

Seleccione su catéter:



Altius Clásico es una gama de catéteres tradicional con un kit de inserción superior.



Altius es una gama de CVC del siglo XXI diseñada para reducir los riesgos para el paciente.



ALTIUS Proactiv + es un producto antimicrobiano, sin Clorhexidina, de unión covalente y no eluyente, diseñado para proteger a su paciente durante toda la duración del tratamiento.



Altius HP es el primer CVC con una línea púrpura específica para la administración de medios de contraste para TC hasta 300 psi y 10 ml por segundo.



ALTIUS Proactiv + HP ofrece todas las ventajas de ALTIUS Proactiv, además de una línea específica de alta presión compatible hasta 300 psi y 10 ml por segundo.

Seleccione su kit de inserción de línea:



Kit de inserción básico de CVC



Kit de inserción intermedio de CVC



Kit de inserción completo

O bien, personalícelo según sus propias especificaciones:

Puede personalizar su kit para que cumpla con la normativa local sobre administración intravenosa y las mejores prácticas en las guías de inserción.

Tanto si necesita un campo quirúrgico de máxima barrera, una funda para la sonda de ecografía o dispositivos de seguridad para objetos punzantes, le ofrecemos la solución.

Póngase en contacto con su representante local para obtener más información.



