




PUNTA ESCALONADA



PUNTA SIMÉTRICA

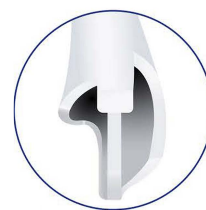

PRECISION FLOW

Largo Plazo

Catéter de Hemodiálisis



Acceso Venoso Central

Mayor eficiencia en diálisis, menos complicaciones.

El catéter ofrece altos flujos de hasta 500 ml/min, lo que resulta en una mayor eficiencia en la diálisis. En comparación con los catéteres de punta simétrica tradicionales, presenta una menor incidencia de trombosis e infecciones.

Cuff de poliéster mejorado

El cuff de poliéster mejorado fija el catéter en su lugar y reduce el riesgo de infección.



Conector externo duradero

El conector es resistente y puede soportar conexiones repetidas con máquinas de diálisis, jeringas y otros dispositivos, ofreciendo una excelente resistencia a la corrosión.

Punta Simétrica / Punta Escalonada


Punta simétrica: Flujo arterial y venoso equilibrado, reduce recirculación, mantiene flujo estable y minimiza trauma vascular. Geometría suave que previene coágulos y asegura rendimiento constante sin importar la orientación del catéter.

Punta escalonada (Step-tip): Separación de puertos arterial y venoso mediante escalón cónico. Reduce riesgo de oclusión arterial, eventos de presión negativa y formación de vaina de fibrina. Mejora estabilidad del flujo en anatomías o situaciones clínicas desafiantes.

Ambos diseños: Alta eficiencia de diálisis; simétrica para uniformidad de flujo, escalonada para confiabilidad en casos complejos.

Túnelizador

El diseño evita el desprendimiento, garantizando una guía exitosa. La forma precurvada y moldeable aumenta su efectividad.

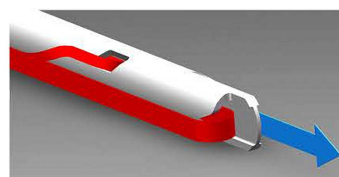

Precision Flow Largo Plazo Catéter de Hemodiálisis

PUNTA SIMÉTRICA

- ✓ **Diseño de punta simetrica:** promueve la permeabilidad del catéter y la dinámica de flujo óptima.
- ✓ **Material de alta resistencia con diseño de lumen interno optimizado:** combina un material duradero y de alta resistencia a la tracción con una forma de lumen diseñada para maximizar el caudal sin comprometer la flexibilidad ni la resistencia a las torceduras.
- ✓ **Recirculación mínima:** garantiza un rendimiento eficiente de la diálisis.
- ✓ **Cateter fabricado con CCP Triniflex:** Construcción Triniflex duradera y biocompatible.



PUNTA SIMÉTRICA

Características principales de Triniflex

Alta resistencia mecánica:

- Buena resistencia al desgarro.
- Excelente flexibilidad.
- Estabilidad dimensional durante procesos de sellado y formado.

Biocompatibilidad:


- Material apto para aplicaciones medicas.
- Bajo nivel de extractables.
- Superficie química estable.



Hemodiálisis con punta simétrica

Referencia	Descripcion	Modelo
SYM-008-2-11-28	Catéter de hemodiálisis crónica 8Fr x 2 lumen x 11cm x 28cm de largo.	Extensión Recta
SYM-008-2-13-30	Catéter de hemodiálisis crónica 8Fr X 2 lumen X 13cm X 30cm de largo.	Extensión Recta
SYM-008-2-15-32	Catéter de hemodiálisis crónica 8Fr X 2 lumen X 15cm X 32cm de largo.	Extensión Recta
SYM-010-2-12-29	Catéter de hemodiálisis crónica 10Fr X 2 lumen X 12cm X 29cm de largo.	Extensión Recta
SYM-010-2-13-30	Catéter de hemodiálisis crónica 10Fr X 2 lumen X 13cm X 30cm de largo.	Extensión Recta
SYM-010-2-15-32	Catéter de hemodiálisis crónica 10Fr X 2 lumen X 15cm X 32cm de largo.	Extensión Recta
SYM-010-2-16-33	Catéter de hemodiálisis crónica 10Fr X 2 lumen X 16cm X 33cm de largo.	Extensión Recta
SYM-012-2-16-33	Catéter de hemodiálisis crónica 12Fr X 2 lumen X 16cm X 33cm de largo.	Extensión Recta
SYM-012-2-19-36	Catéter de hemodiálisis crónica 12Fr X 2 lumen X 19cm X 36cm de largo.	Extensión Recta
SYM-012-2-23-40	Catéter de hemodiálisis crónica 12Fr X 2 lumen X 23cm X 40cm de largo.	Extensión Recta
SYM-135-2-16-33	Catéter de hemodiálisis crónica 13.5Fr X 2 lumen X 16cm X 33cm de largo.	Extensión Recta
SYM-135-2-19-36	Catéter de hemodiálisis crónica 13.5Fr X 2 lumen X 19cm X 36cm de largo.	Extensión Recta
SYM-135-2-23-40	Catéter de hemodiálisis crónica 13.5Fr X 2 lumen X 23cm X 40cm de largo.	Extensión Recta
SYM-135-2-27-44	Catéter de hemodiálisis crónica 13.5Fr X 2 lumen X 27cm X 44cm de largo.	Extensión Recta
SYM-135-2-28-45	Catéter de hemodiálisis crónica 13.5Fr X 2 lumen X 28cm X 45cm de largo.	Extensión Recta
SYM-135-2-33-50	Catéter de hemodiálisis crónica 13.5Fr X 2 lumen X 33cm X 50cm de largo.	Extensión Recta
SYM-145-2-19-36	Catéter de hemodiálisis crónica 14.5Fr X 2 lumen X 19cm X 36cm de largo.	Extensión Recta
SYM-145-2-23-40	Catéter de hemodiálisis crónica 14.5Fr X 2 lumen X 23cm X 40cm de largo.	Extensión Recta
SYM-145-2-28-45	Catéter de hemodiálisis crónica 14.5Fr X 2 lumen X 28cm X 45cm de largo.	Extensión Recta
SYM-145-2-33-50	Catéter de hemodiálisis crónica 14.5Fr X 2 lumen X 33cm X 50cm de largo.	Extensión Recta
SYM-145-2-44-61	Catéter de hemodiálisis crónica 14.5Fr X 2 lumen X 44cm X 61cm de largo.	Extensión Recta
SYM-145-2-55-72	Catéter de hemodiálisis crónica 14.5Fr X 2 lumen X 55cm X 72cm de largo.	Extensión Recta
SYM-145-2-19-36P	Catéter de hemodiálisis crónica 14.5Fr X 2 lumen X 19cm X 36cm de largo.	Extensión Precurvada
SYM-145-2-23-40P	Catéter de hemodiálisis crónica 14.5Fr X 2 lumen X 23cm X 40cm de largo.	Extensión Precurvada
SYM-145-2-28-45P	Catéter de hemodiálisis crónica 14.5Fr X 2 lumen X 28cm X 45cm de largo.	Extensión Precurvada
SYM-145-2-33-50P	Catéter de hemodiálisis crónica 14.5Fr X 2 lumen X 33cm X 50cm de largo.	Extensión Precurvada
SYM-155-2-19-36	Catéter de hemodiálisis crónica 15.5Fr X 2 lumen X 19cm X 36cm de largo.	Extensión Recta
SYM-155-2-23-40	Catéter de hemodiálisis crónica 15.5Fr X 2 lumen X 23cm X 40cm de largo.	Extensión Recta
SYM-155-2-28-45	Catéter de hemodiálisis crónica 15.5Fr X 2 lumen X 28cm X 45cm de largo.	Extensión Recta
SYM-155-2-33-50	Catéter de hemodiálisis crónica 15.5Fr X 2 lumen X 33cm X 50cm de largo.	Extensión Recta
SYM-155-2-44-61	Catéter de hemodiálisis crónica 15.5Fr X 2 lumen X 44cm X 61cm de largo.	Extensión Recta
SYM-155-2-55-72	Catéter de hemodiálisis crónica 15.5Fr X 2 lumen X 55cm X 72cm de largo.	Extensión Recta



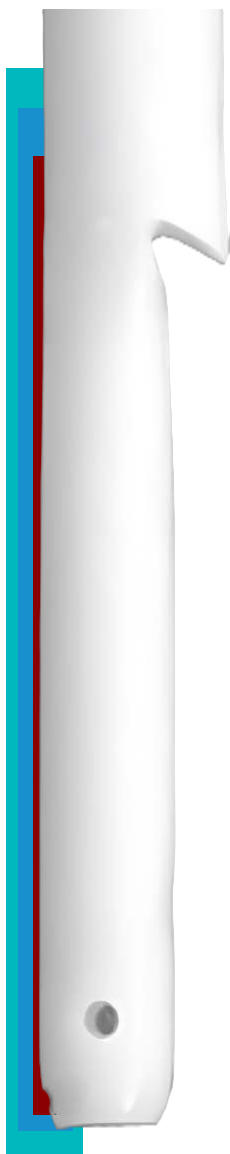

PUNTA ESCALONADA

- ✓ **Tubo de silicona suave y cómodo:** garantiza la comodidad del paciente y la biocompatibilidad a largo plazo.
- ✓ **Diseño de punta escalonada:** Reduce el riesgo de formación de coágulos sanguíneos.
- ✓ **Cateter fabricado con CCP Triniflex:**
Construcción Triniflex duradera y biocompatible.



PUNTA ESCALONADA

Características principales de Triniflex

Alta resistencia mecánica:

- Buena resistencia al desgarro.
- Excelente flexibilidad.
- Estabilidad dimensional durante procesos de sellado y formado.

Biocompatibilidad:

- Material apto para aplicaciones medicas.
- Bajo nivel de extractables.
- Superficie química estable.



Hemodiálisis con punta escalonada

Referencia	Descripcion	Modelo
NEF-145-2-19-36	Catéter hemodiálisis crónica 14.5 Fr, 2 lumen, 19cm x 36cm de longitud	Extensión Recta
NEF-145-2-23-40	Catéter hemodiálisis crónica 14.5Fr 2 Lumen 23cm X 40cm de longitud	Extensión Recta
NEF-145-2-28-45	Catéter hemodiálisis crónica 14.5Fr 2 Lumen 28cm X 45cm de longitud	Extensión Recta
NEF-145-2-33-50	Catéter hemodiálisis crónica 14.5Fr 2 Lumen 33cm X 50cm de longitud	Extensión Recta
NEF-145-2-44-61	Catéter hemodiálisis crónica 14.5Fr 2 Lumen 44cm X 61cm de longitud	Extensión Recta
NEF-145-2-55-72	Catéter hemodiálisis crónica 14.5Fr 2 Lumen 55cm X 72cm de longitud	Extensión Recta
NEF-145-2-19-36P	Catéter hemodiálisis crónica 14.5 Fr, 2 lumen, 19cm x 36cm de longitud	Extensión Precurvada
NEF-145-2-23-40P	Catéter hemodiálisis crónica 14.5 Fr, 2 lumen, 23cm x 40cm de longitud	Extensión Precurvada
NEF-145-2-28-45P	Catéter hemodiálisis crónica 14.5 Fr, 2 lumen, 28cm x 45cm de longitud	Extensión Precurvada

Gamamed Vascular Systems Inc
Redefining Vascular Wellness

 **Operational Headquarters**
815 14th Street SW, Suite C250,
Loveland CO 80537
Email: info@gamavascular.com
phone: +1 307 998 97 32
www.gamavascular.com

From intravenous catheters to central venous access systems, our solutions are trusted by hospitals, clinics, and healthcare providers around the world.

