


INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

LÍNEA PICC	
CÓDIGO DE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
KP-CTSL-0355-KOD	Kit Kimal PICC compatible con CT 3 Fr x 55 cm de un solo lumen con sobredilatador
KP-CTSL-0455-KOD	Kit Kimal PICC compatible con CT 4 Fr x 55 cm de un solo lumen con sobredilatador
KP-CTSL-0555-KOD	Kit Kimal PICC compatible con CT 5 Fr x 55 cm de un solo lumen con sobredilatador
KP-CTDL-0555-KOD	Kit Kimal PICC compatible con CT 5 Fr x 55 cm de doble lumen con sobredilatador
KP-CTDL-0655-KOD	Kit Kimal PICC compatible con CT 6 Fr x 55 cm de doble lumen con sobredilatador
KP-CTTL-0655-KOD	Kit Kimal PICC compatible con CT 6 Fr x 55 cm de triple lumen con sobredilatador

LÍNEA PICC

KITS DE INSERCIÓN DE CATÉTERES CENTRALES DE INSERCIÓN PERIFÉRICA

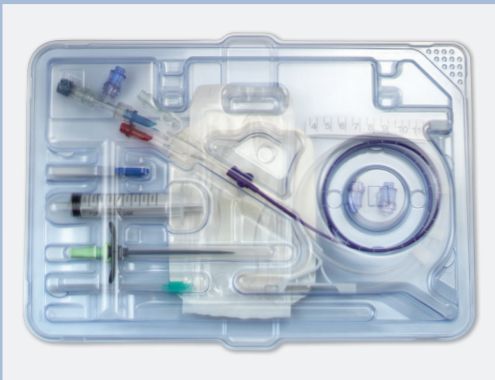

Kimal PICCLINE se suministra con el kit MST como estándar. Los PICC Kimal con kits de punción o tipo sobre la aguja están disponibles bajo solicitud.

El kit MST para PICC Kimal consta de los siguientes elementos:

- Catéter PICC con clasificación para TC
- Aguja G21 x 7 cm con punta ecogénica (conector verde)
- Jeringa LS de 10 ml
- Bisturí mini n.º 11
- Guía de nitinol 0,018” de 50 cm con punta J flex
- Vaina de desprendimiento corto microintroducir
- Estilete/guía de nitinol 0,018” de 80 cm con punta recta atraumática
- T-conector con conector LuerSafe® removible y ajustador, para mantener el estilete en posición dentro del catéter
- Conector LuerSafe adicional en opciones multilumen, para uso como tapones finales
- Bloqueo fijo con sección de espuma recortada, para fijaciones seguras y sin desplazamiento del catéter
- Apósito transparente
- Cinta métrica de papel

Para más información, precios o muestras, consulte con su representante local de Kimal o contacte con:

Reino Unido	MEDIO ORIENTE + ÁFRICA	INTERNACIONAL
Tel: +44 (0)845 437 9542	Tel: +97 16 552 8146	Tel: +44 (0)845 437 9543
Fax: +44 (0)845 437 9544	Fax: +97 16 552 8147	Fax: +44 (0)845 437 9544
Correo electrónico: customerservices@kimal.co.uk	Correo electrónico: mea@kimal.co.uk	Correo electrónico: internationalenquiries@kimal.co.uk

LÍNEA PICC

Catéter central insertado periféricamente

RIESGO REDUCIDO, MAYOR COMODIDAD, SEGURIDAD AUMENTADA

LÍNEA PICC

Catéter central insertado periféricamente

CONEXIONES LUER CODIFICADAS POR COLOR

La identificación más clara del lumen reduce el riesgo de conexiones incorrectas

ABRAZADERAS RÍGIDAS

Fuerte y robusto para una mayor seguridad

LÍNEAS DE EXTENSIÓN TRANSPARENTES

Mayor visibilidad del flujo

APTO PARA TC

Ofrece línea de alta presión de 5 ml/segundo

IDENTIFICADOR DE ALAS PARA SUTURA

Tamaño francés claramente indicado

CONO INVERSO CORTO

Mejora en la colocación del PICC y reducción del riesgo de infección

MARCAS DE PROFUNDIDAD

Recortable cada 1 cm

MATERIAL DE POLIURETANO

Seguro y duradero para mejorar la seguridad del paciente

ACCESO VASCULAR SEGURO Y FIABLE A LARGO PLAZO

La gama de catéteres centrales de inserción periférica de Kimal puede utilizarse para administrar líquidos, antibióticos, quimioterapia, nutrición parenteral, fármacos para el control del dolor y para la toma de muestras sanguíneas.

